


Instalação do BCM e FMT

Fluid Management Tool

- 
- Instalação do BCM Card Manager
 - Instalação do Fluid Management Tool
 - Suporte Técnico de TI;
 - Considerações finais.

Janeiro / 2020

Contato Service Desk

suporte.br@fmc-ag.com

Interno: 2500

Externo: (21) 2179-2500

Suporte Técnico de TI

Administrativo da Clínica



Administrativo Fresenius



Service Desk TI

Contato Service Desk

suporte.br@fmc-ag.com



Interno: 2500

Externo: (21) 2179-2500


Instalação do FMT

Após a instalação do BCM é necessário instalação do Fluid Management Tool.


Para iniciar, abra a pasta Fluid Management Tool e clique em SetUp com o botão direito e execute como administrador, como indicado na imagem a baixo.

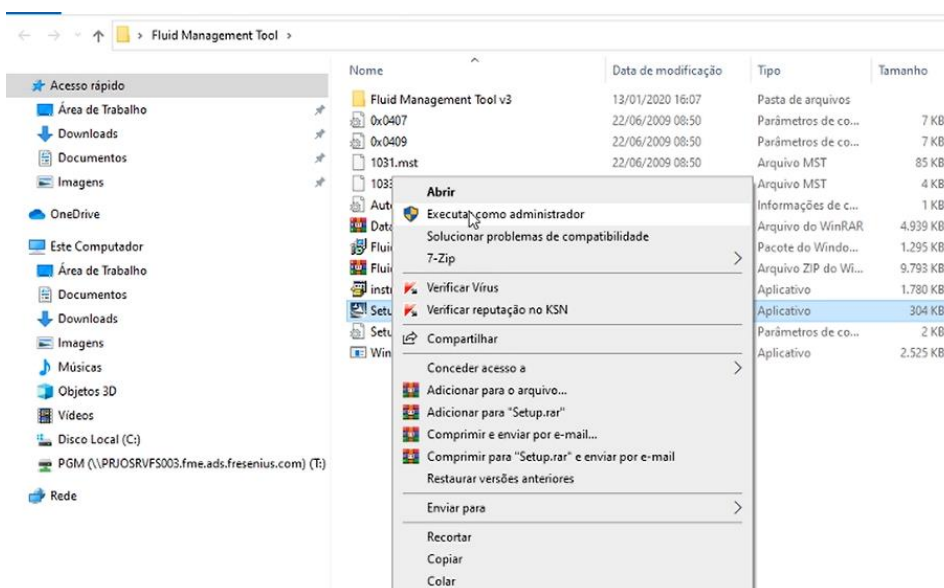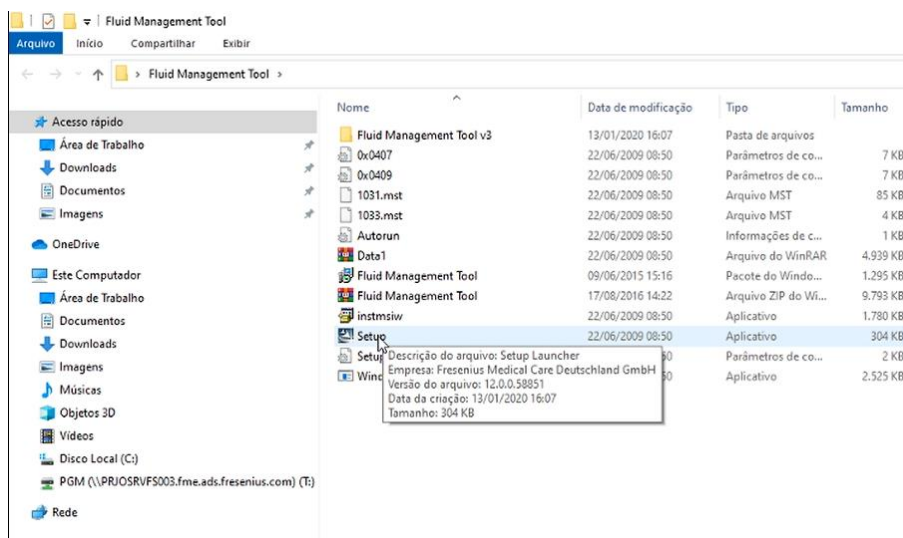


Clique em OK na opção de Language.

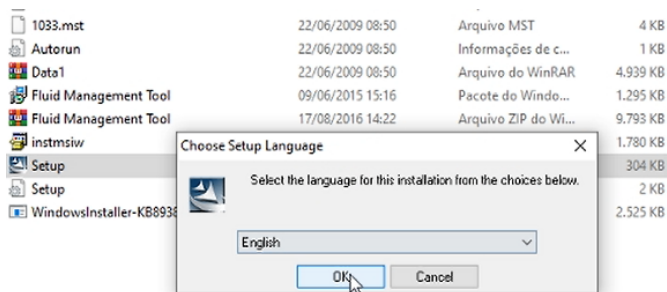


Selecione Next na janela que abre na sequência.

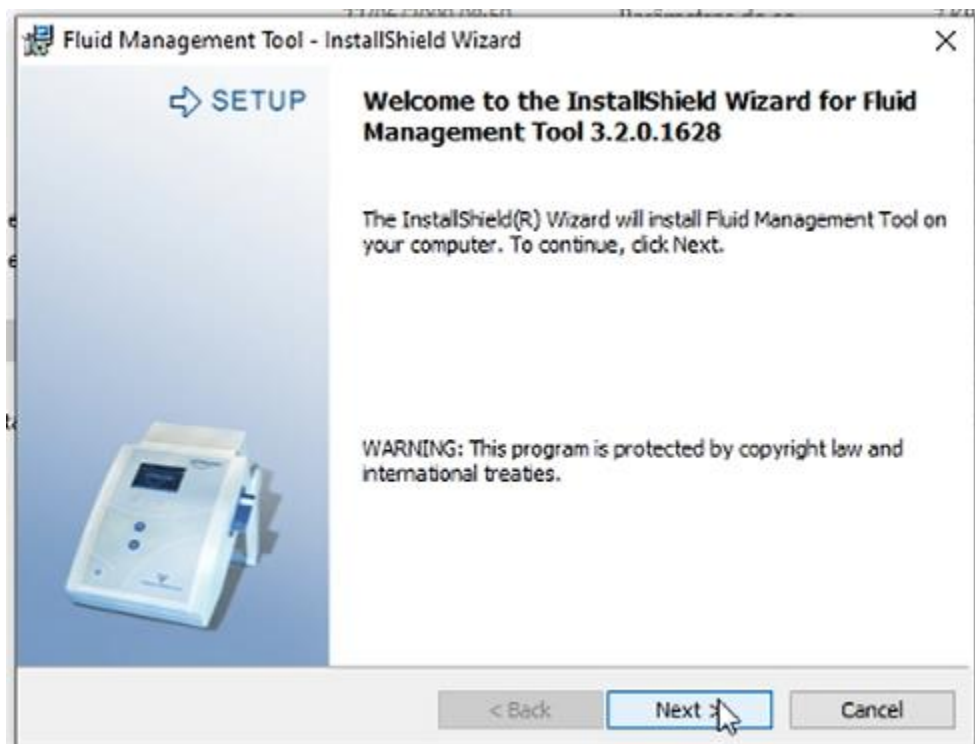


Selecione opção (I accept...) e Next.

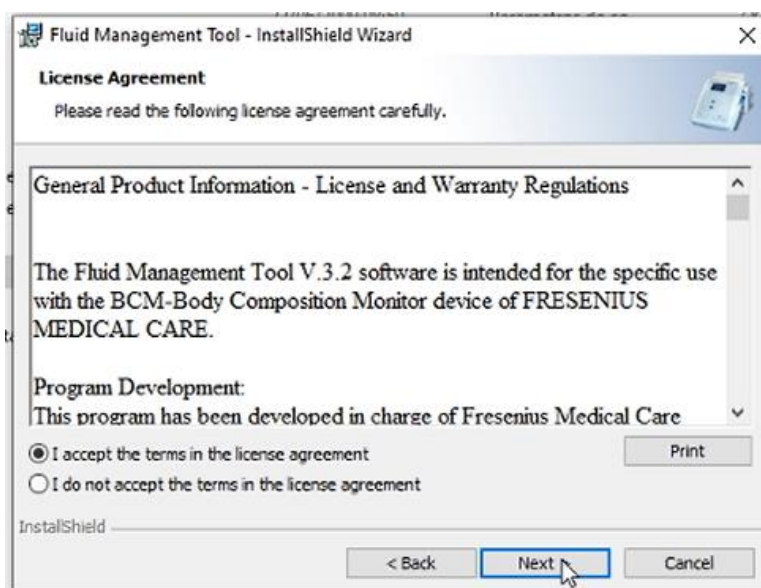


Prossiga clicando Next.

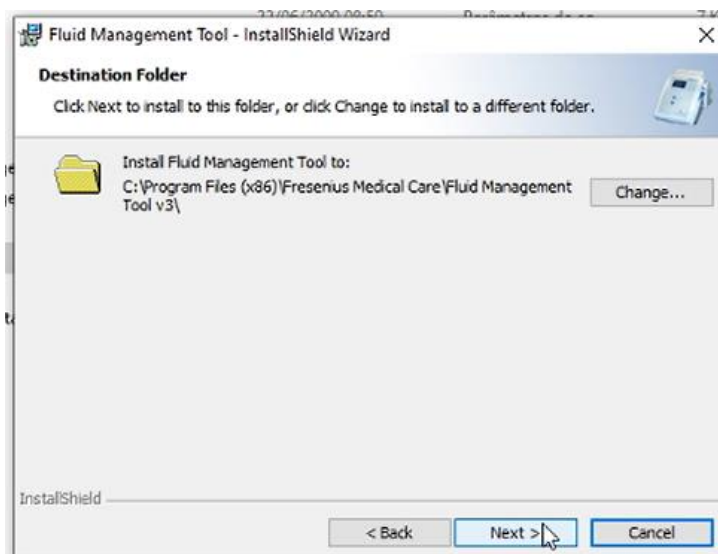

Antes de prosseguir selecione a opção Complete.

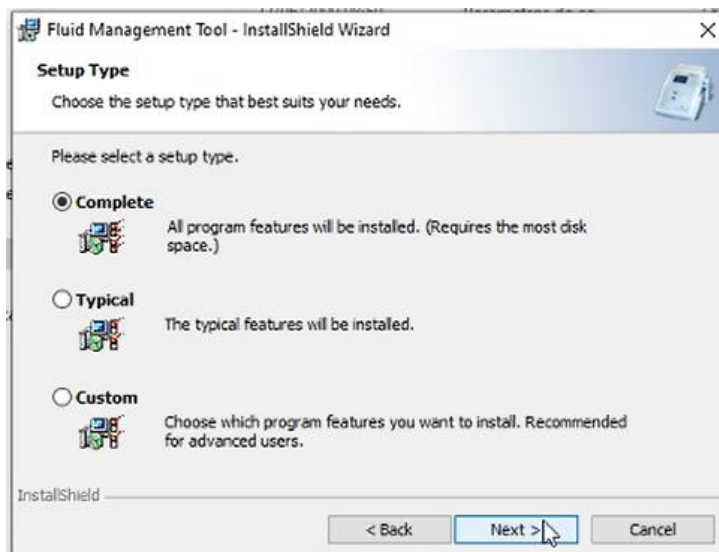


Clique em Install.

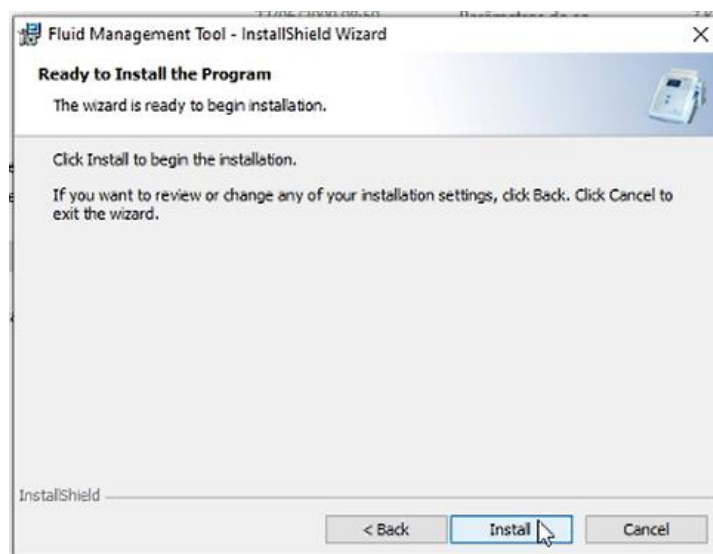


Finalize a instalação em Finish.



Volte a pasta do arquivo: BCM / BCM e clique com o direito e execute como administrador o ícone CardMan3x21_V1_2_6_5_x64 .

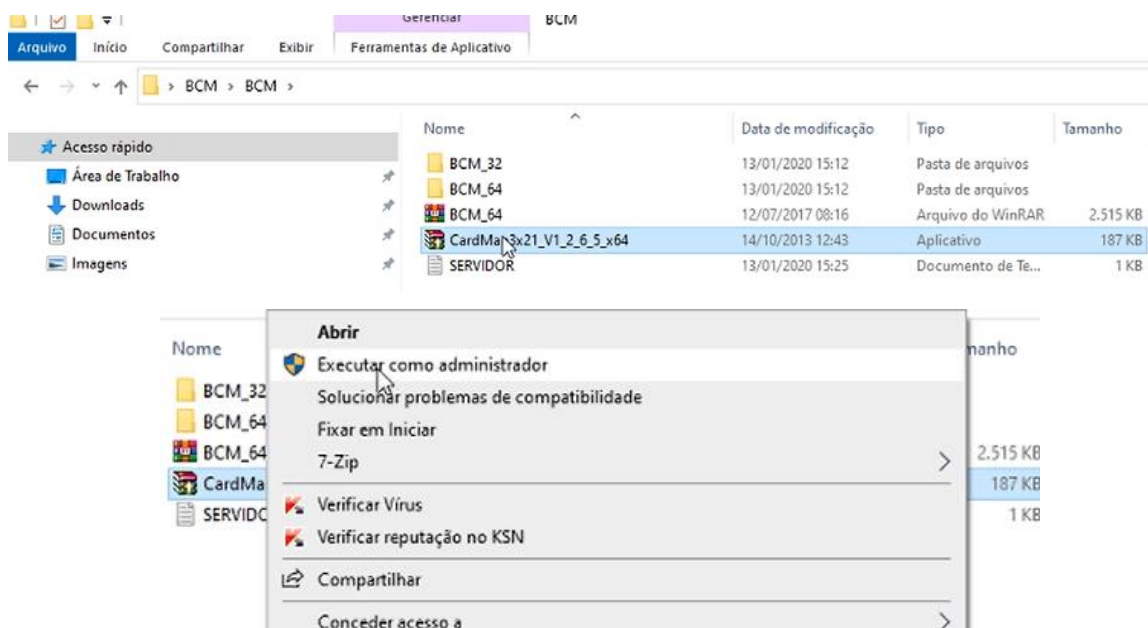


Aceite os termos em Accept.

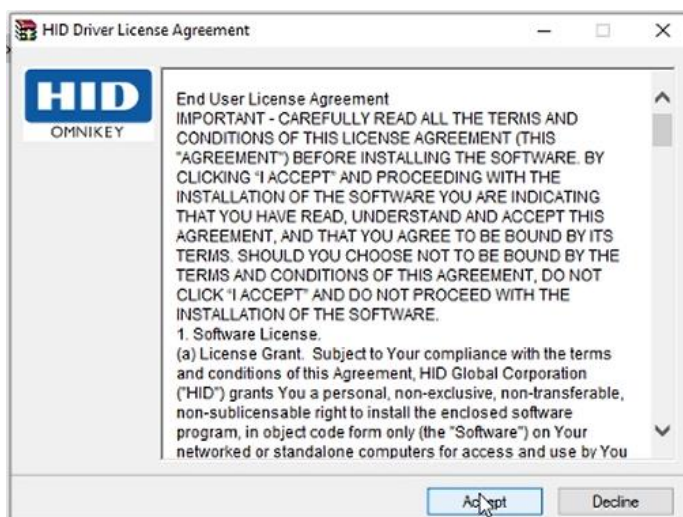


**Inicie na janela seguinte clicando em Install.
Ela fechará assim que finalizar.**




Entrando no Gerenciamento de computador, clique em Gerenciador de Dispositivos.

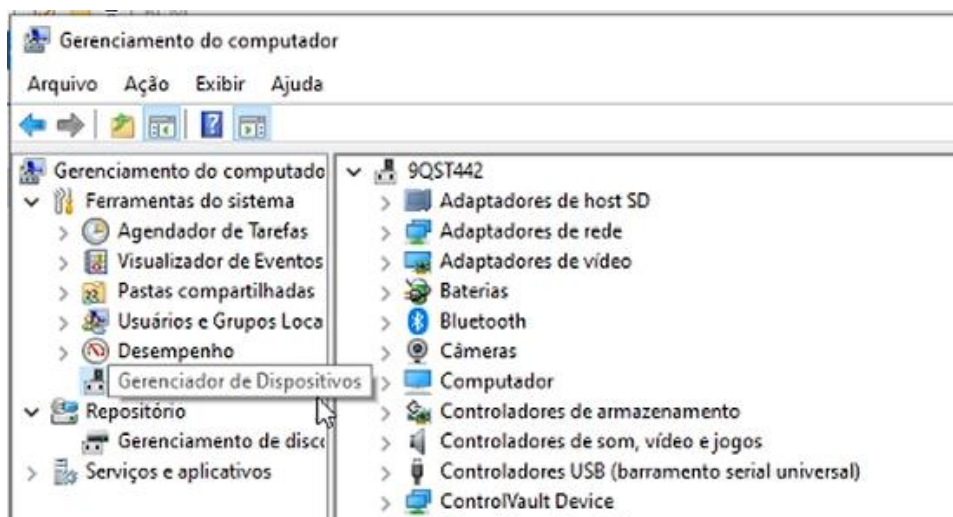


Procure pelo dispositivo (Leitor de Cartões Inteligentes) e com o botão direito na opção, Microsoft Usbccid SmartcardReader (Omnikey 3021) clique em Atualizar driver.

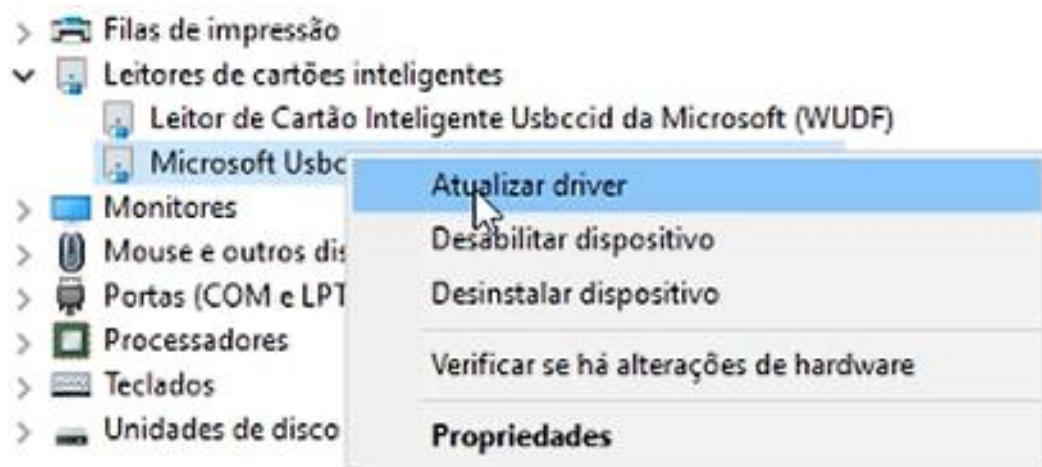



Na janela que se segue selecione Procurar software de drive no computador.

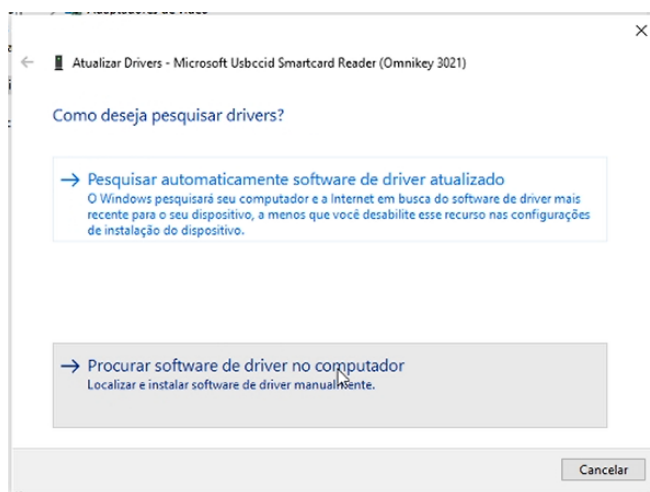


Procure na janela clicando em Procurar seguindo o caminho: **C: / OMNIKEY / 3x21_V1_2_6_5 / W64** .

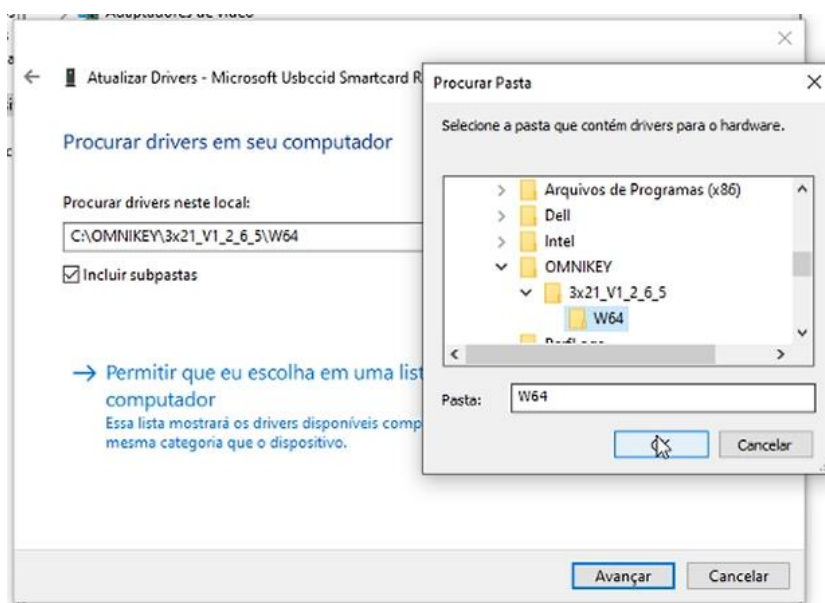


Avance e feche para finalizar a instalação do Drive.

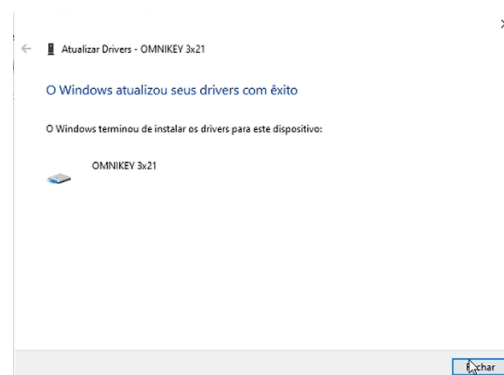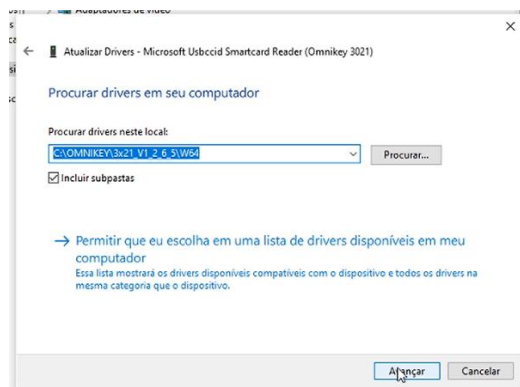


Após a instalação do drive correto, para que não haja erro, é necessário que desinstale o drive alternativo.

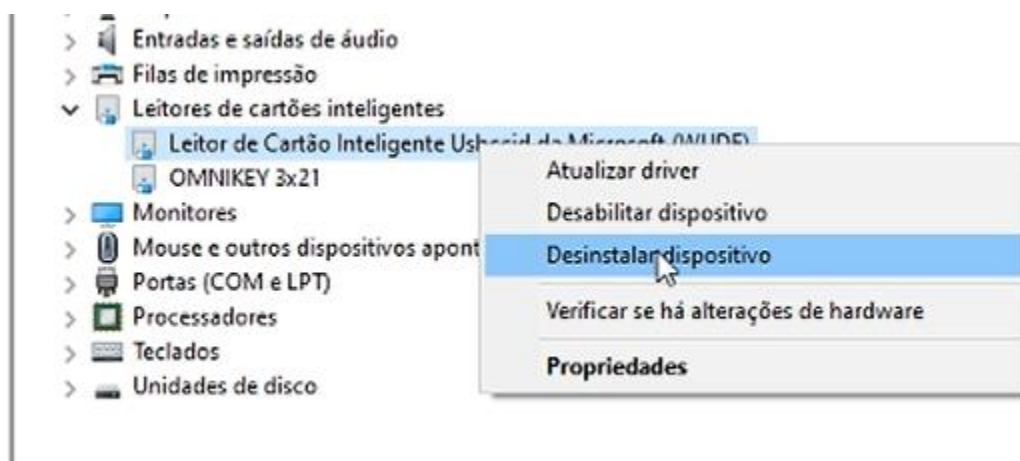


Próxima etapa é copiar a pasta Fluid Management Tool V3 que se encontra na pasta Fluid Management Tool.

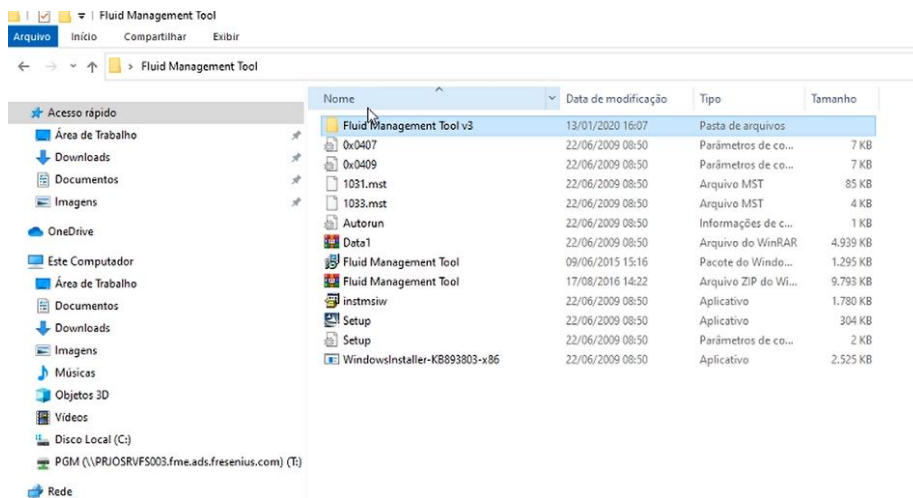

Criar uma Nova pasta com o nome (Fresenius Medical Care) na pasta C: / Arquivos de Programa (x86) .

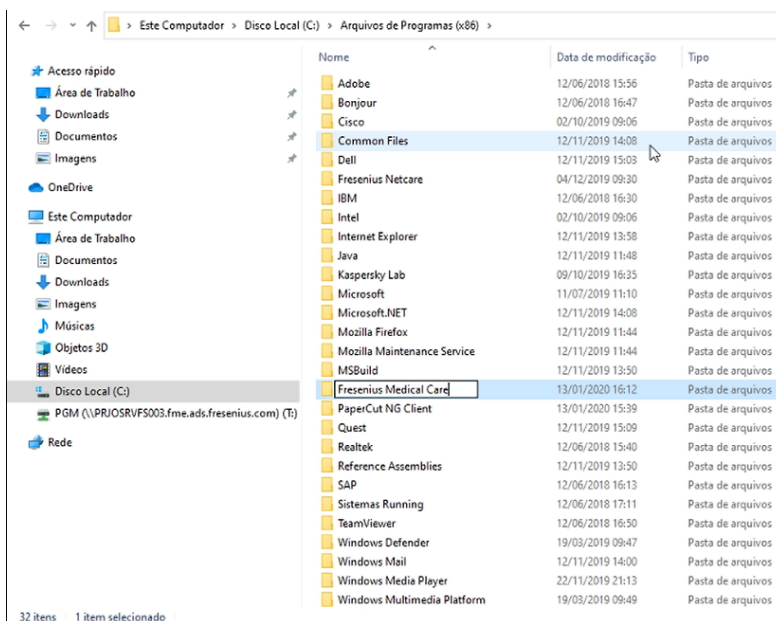

E colar a pasta (Fluid Management Tool v3) na pasta recém criada (Fresenius Medical Care).

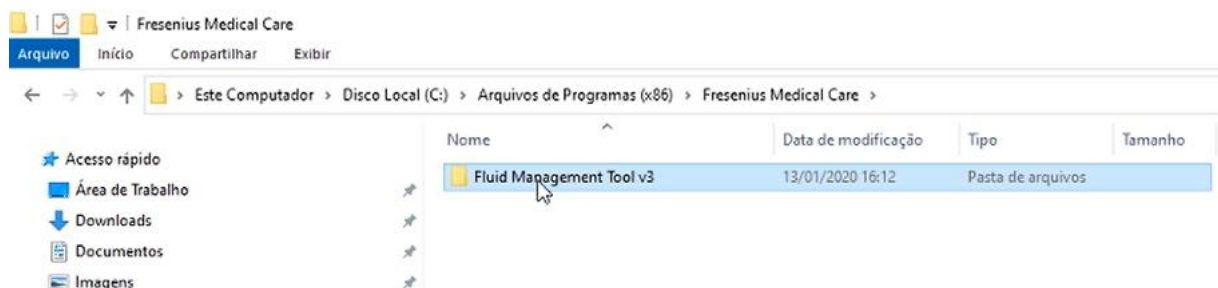

Abra a pasta e clique no ícone (FMT_en) e a janela seguinte vai abrir, finalizada a instalação.



Suporte Técnico de TI

Administrativo da Clínica



Administrativo Fresenius



Service Desk TI

Contato Service Desk

suporte.br@fmc-ag.com

Interno: 2500

Externo: (21) 2179-2500

**Obrigado
e
Bom trabalho!**